

DENTALSIL®

DENTIST & LABORATORY PRODUCTS



Check pagina 8
voor meer info

September '25							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
36	1	2	3	4	5	6	7
37	8	9	10	11	12	13	14
38	15	16	17	18	19	20	21
39	22	23	24	25	26	27	28
40	29	30					

Oktober '25							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
40			1	2	3	4	5
41	6	7	8	9	10	11	12
42	13	14	15	16	17	18	19
43	20	21	22	23	24	25	26
44	27	28	29	30	31		

November '25							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
44						1	2
45	3	4	5	6	7	8	9
46	10	11	12	13	14	15	16
47	17	18	19	20	21	22	23
48	24	25	26	27	28	29	30

■ = 16 september: Prinsjesdag

■ = 4 oktober: Dierendag

■ = 26 oktober: Wintertijd

■ = 11 november: Sint Maarten



Mondkapje Hypo-allergeen

7 BESCHERMENDE LAGEN

Voorkom kortademigheid, hoesten, hoofdpijn en irritaties aan de ogen.

Met de 7 beschermde lagen ben je optimaal beschermd tegen:

- micro-organismen
- lichaamsvloeistoffen
- fijnstof



Waterproof

Uitleg lagen:

- **S** Het absorbeert lucht en vocht van het gezicht.
- **M** Laag met hoge intensiteit die deeltjes in de lucht filtert.
- **S** Het blokkeert de inademing van kleine waterdeeltjes en virussen
- **Totale veiligheid:** Het beschermt van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.
- **Antibacterieel:** Stof ontsmet met een specifieke UV-C-behandeling.
- **Waterbestendig:** Gemaakt van waterdichte stof.
- **Optimale bacteriële filtratie:** Blokkeert kleine waterdeeltjes en virussen
- **Elastische lussen:** Latexvrij

Overig: CE-gecertificeerd, Type IIR medical device, norm UNI EN 14683
2 overlappende lagen SMS (40gr.) 1 gekleurde laag S (50gr.)
Verpakking: 1 doosje á 50 stuks (per 10 stuks in folie verpakt)

360°

Totale bescherming



Afmeting: 17,3 x 9,8 cm

IIR

TIP

7-laags

5 doosjes á 50 mondkapjes

MIX AAN KLEUREN
Random verpakt

SLECHTS

€ XX,xx

LET OP! Zolang voorraad strekt

Standaard type: 3-laags mondkapjes

(elastiek achter de oren, vormbare neusstrip, glasvezelvrij, latexvrij, hypoallergeen.

10 doosje á 50 mondkapjes
3-laags € XX,xx



Art.nr: S-02 108

CE-gecertificeerd, Type IIR, (BFE)>99%, EN 14683



5 doosjes

€ XX,xx

Mix aan kleuren



Neotril handschoenen

Materiaal dikte
0,16 mm

25



LILA

XS: 01 770
S: 01 771
M: 01 772
L: 01 773
XL: 01 774

1000
handschoenen
€ XXX,xx

Poeder-vrij



De beste ALLROUND handschoen

Poeder vrij, flexibel, getextureerde micro-touch oppervlakte, vinger gevoeligheid.

Beste van 3 materialen: flexibel en biologische bescherming zoals latex, chemische resistentie zoals nitril, weer- olie en verouderings bestendig, super sterk en scheurvast zoals neopreen.

Geschikt voor het werken met o.a. monomeer!

EXTRA
BESCHERMD
Latex vrij

Nitril handschoenen

Materiaal dikte
0,09 mm

24



PAARS

XS: 01 395
S: 01 396
M: 01 397
L: 01 398
XL: 01 399



WIT

XS: 01 375
S: 01 376
M: 01 377
L: 01 378
XL: 01 379



BLAUW

XS: 01 575
S: 01 576
M: 01 577
L: 01 578
XL: 01 579

Latex en poeder vrij, universeel inzetbaar, perfecte pasvorm, uitstekende grip, flexibel, getextureerde micro-touch oppervlakte, uitstekende vinger gevoeligheid, super sterk en extra dun. Geschikt voor o.a. gebruik bij onderzoek patiënten en het hanteren van instrumenten.

1500
handschoenen
€ XX,xx


Al onze medische producten waaronder; nitril, neotril en latex handschoenen worden Thiuram vrij geproduceerd. Dentalsil is gespecialiseerd in producten voor de medische sector, die minder of geheel niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker en de patiënt.

Wat is Thiu(r)am?
Tetramethylthiuram accelerator poeder zorgt voor een sneller vulkanisatie proces ofwel een snellere productie van o.a. handschoenen. Bij dit proces wordt carcinogene (kanker-verwekkende) nitrosamine in de handschoen gevormd, welke door huid-contact kan worden opgenomen.



HANDSCHOEN MATEN: XS = 5 - 5½ • S = 6 - 6½ • M = 7 - 7½ • L = 8 - 8½ • XL = 9 - 9½

Meng-bekers

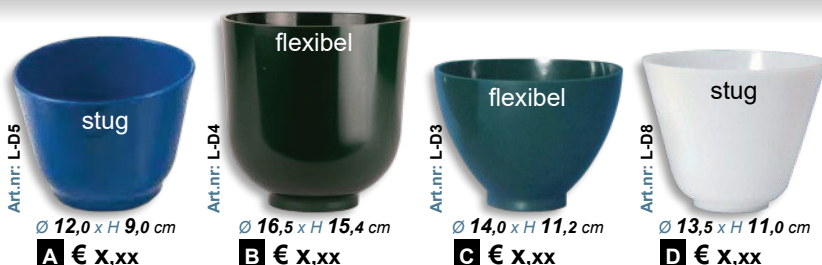

1 stuk vanaf

€ X,xx

Meng-napjes

Complete SET:

van elk type 1 stuk inclusief dekseltjes voor meng-napje A en B:

slechts

€ XX,xx

Dekseltjes zijn ook los verkrijgbaar. Uitsluitend voor mengnapje A en B.

1 stuk vanaf


€ X,xx

A € XX,xx

B € X,xx

C € X,xx

D € X,xx

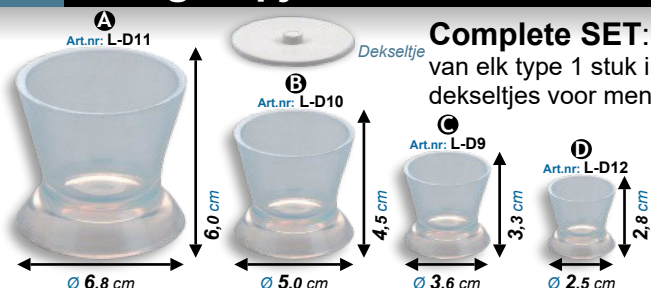


Diamant instrument

Gegalvaniseerde diamant

met een grove diamant-korrel, ventilatie gaten zorgt voor het afvoeren van de hitte ontwikkeling.

Slijpt gips en kunststof.

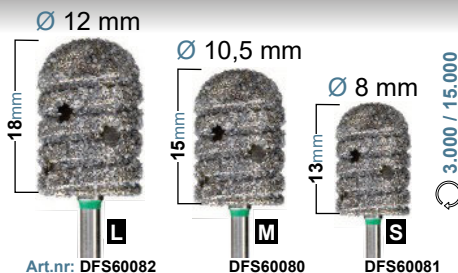


1 stuk

€ XX,xx

Art.nr: divers

Flexibele dunne kunststof slijpschijven

Coating aan één zijde. Ruimte creëren tussen elementen. Ideaal voor het verwijderen/bewerken van contouren en gladmaken van kunststoffen en composieten. **SET 3 mandrellen + 15 schijven**

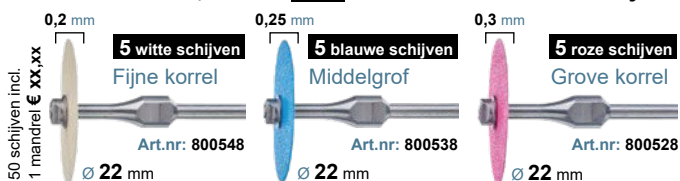

1 x SET

€ XX,xx

Art.nr: DFS800558

Dental boxen inclusief bedrukken van logo

500 stuks inclusief LOGO: € xxx,-	500 stuks inclusief LOGO: € xxx,-	500 stuks inclusief LOGO: € xxx,-	500 stuks inclusief LOGO: € xxx,-	500 stuks inclusief LOGO: € xxx,-
Dental box + insert	Ortho box M	Ortho box S	K&B box S	K&B box L
				
Kenmerken: H = 6,5 cm Ø = 8,3 cm Ø = 7,5 cm (insert) Gewicht: 59 gr. Kleuren: 	Kenmerken: H = 4,5 cm B = 8,0 cm D = 7,0 cm Gewicht: 36 gr. Kleuren: 	Kenmerken: H = 2,7 cm B = 7,6 cm D = 6,7 cm Gewicht: 25 gr. Kleuren: 	Kenmerken: H = 2,0 cm B = 3,5 cm D = 3,5 cm Gewicht: 7 gr. Kleuren: 	Kenmerken: H = 2,2 cm B = 5,6 cm D = 4,3 cm Gewicht: 14 gr. Kleuren: 



Totale kosten (zie bovenstaande boxen):

De 500 dental boxen inclusief logo of tekst set- en drukkosten zijn gebaseerd op 1 kleur bedrukking en 1 kleur dental box.

Heeft uw logo of tekst één of twee kleuren, dan geldt er een minimale afname van 500 dental boxen, voor een tweede kleur betaald u per kleur & box € x,xx



Wat hebben wij van u nodig?

- een logo of tekst... en wij doen de rest!

Extra kosten

Diverse kleuren dental boxen incl. 1 kleur logo:
€ x,xx per dental box

Bestel snel en eenvoudig deze solide dental box met insert, een ortho box of een K&B box met uw eigen bedrijfsnaam/adres logo erop gedrukt. Deze ortho-, dental boxen zijn solide, compact, sterk, geschikt voor het hygiënisch bewaren en transporteren van o.a. een gebitsprothese, (sport)-bitje, beugel, splint, kronen, volledige brug. **Mooie reclame boodschap naar uw klanten of patiënten.**

Nilfisk - producten voor buitenshuis



Uitgelicht hebben wij de Nilfisk Excellent 170-10 hogedrukreiniger met multifunctioneel mondstuk.

Krijg krachtige resultaten met de Excellent 170 met induciemotor voor een stillere reiniging, Power Foam Blaster voor een sneeuwschuimeffect en Multipurpose Gun & Lance met 3 verschillende sproeierinstellingen. De Excellent 170 drukreiniger wordt ook geleverd met de Short Range Nozzle die kan worden gebruikt voor zachtere reinigingsstaken zoals fietsen of gevels. Grotere oppervlakken glanzen in een mum van tijd dankzij de eenvoudige installatie en de Steelflex-slang van 10 meter, met een totaal reinigingsbereik van 15 meter. [Meer info? check: https://www.dentalsil.com/nilfisk.html](https://www.dentalsil.com/nilfisk.html)

Hogedrukreiniger Excellent 170-10

**xx%
korting**

Gebruik de kortingscode van Dentalsil en krijg xx% korting op alle Nilfisk:

- reinigingsmiddelen
- hogedrukreinigers
- accessoires



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023

reddot winner 2023

Nilfisk - producten voor binnenshuis



Voor binnenshuis hebben wij de krachtige draadloze Nilfisk S1 steelstofzuiger uitgelicht met maximale flexibiliteit, ontworpen voor comfortabel schoonmaken, van tapijt tot harde vloeren met slechts een simpele druk op de knop.

De gebogen handgreep biedt een comfortabele grip voor één of twee handen, zodat ook moeilijk bereikbare plaatsen zoals deurlijsten en planken moeiteloos gereinigd kunnen worden. Voor extra gebruiksgemak kan de handstofzuiger met één druk op de knop worden losgekoppeld, zodat je zelfs de lastigste plekjes in huis de kleinste stofdeeltjes effectief in een handomdraai kunt aanpakken en er weer vlekkeloos uitziet.

Meer info? check: <https://www.dentalsil.com/nilfisk.html>



Cilinderstofzuiger

Gebruik de kortingscode van Dentalsil en krijg xx% korting op alle Nilfisk:

- Snoerloze stofzuigers
- cilinderstofzuigers
- stof-/waterzuigers
- stofzuigerzakken
- accessoires

**xx%
korting**

**5 JAAR
GARANTIE***

*op de motor

Bij een minimale besteding van slechts € xx,- uit het hele assortiment van Dentalsil ontvangt u van ons een persoonlijke kortingscode van xx% op het hele assortiment van Nilfisk. Direct bestellen of voor meer informatie...

...check onze website: <https://dentalsil.com/nilfisk>

Voor elke schoonmaak klus in het rond het huis heeft Nilfisk de juiste oplossing!



Snoerloze steelstofzuiger, type S1

CAD/CAM - 3D Model Separator PMMA

Speciaal ontworpen als isolator voor 3D-geprinte modellen.



NEW Isoleert modellen tegen prothese en KFO kunststof. Eenvoudig middels spuitflacon aanbrengen op model en laten drogen. Er ontstaat een extreem dunne isolerend film laagje. Na polymerisatie kan het werkstuk makkelijk van het model worden afgehaald met behoud van alle oppervlakte details. Het separatie middel verwijderen onder stromend water.

Inhoud spuitflacon 125 of 500 ml.



Inhoud 125 ml

€ **XX,xx**

Art.nr: DFS25050

Inhoud 500 ml

€ **XX,xx**




Art.nr: DFS25040

Epiplating - Titaniumplaten voor chirurgisch-epithetisch

De Epiplating **Mono** is ontworpen voor gebruik tijdens ingrepen aan de botstructuren van de schedel. Het wordt gebruikt voor de botverankering van de epithese bij craniofaciale defecten. De Epiplating Mono is met name geschikt voor gebruik bij aangeboren afwijkingen, trauma en tumorresecties.

Laag perforatie risico en bij voorkeur geschikt voor behandelingen bij dunne huid/flapplastische aandoening.

Bijzonder geschikt bij beperkte ruimtelijke omstandigheden in de orbita. **Compatible met de slijtage-vrije titaanmagneten van STECO.**

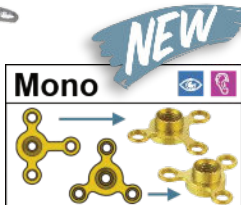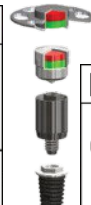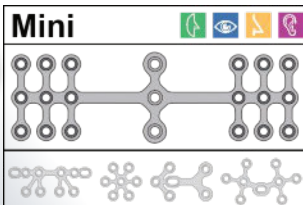

Slijtage-vrije titaanmagneten voor 60+ implantaat-systemen

CHECK de website:

<https://www.dentalsil.com/steco>



Steco voor tandtechniek

StecoGuide-boorhulzen eenvoudige chirurgische geleiders

StecoGuide is een systeem van titanium boorhulzen voor allerlei chirurgische hulplijnen of sjablonen. Van eenvoudige vacuüm-gevormde stents tot 3D-geprinte chirurgische sjablonen, we hebben de juiste sleeve.



StecoGuide-boorhulzen

StecoGuide biedt titanium hulzen in verschillende vormen en diameters voor alle toepassingen in een mal-plaatjes-implantaatchirurgie.

Meer informatie of direct bestellen :

Tandtechniek, Tandheelkunde, Endologie

Bezoek onze website:

<https://www.dentalsil.com/steco>

of scan de QRcode



Steco magneet abutments voor bijna elk implantaatsysteem.

Veel beter dan steggen, drukknopverbindingen zoals kogelankers of locators. Eenvoudig schoonmaken door de super gladde oppervlakte. Veilig in gebruik, de prothese is makkelijk in/uit doen, hoge fixatie-hechtkracht door twee aantrekkende magneten (matrix magneet + abutment magneet), is zelfcentrerend door het gepatenteerde unieke HOL-BOL systeem en hierdoor absoluut slijtage-vrij.


Optimaal voordeel voor de behandelaar en patiënt

Verwerking is makkelijk en eenvoudig, zowel chairside als labside toepasbaar. Universele titaan-magneten in verschillende hoogtes, vormen en trekkrachtsterktes verkrijgbaar. Titaan magneten zijn hitte- en corrosiebestendig en autoclaveerbaar.

Voor personen met een beperking (gehandicapten, ouderen, mensen met jicht, reuma, RSI, parkinson, peesletsel, tia) van de fijne motoriek in armen en handen zijn steggen en druk-knopverbindingen niet eenvoudig.

STECO titaanmagneten biedt voor elke situatie en patiënt wel de juiste en ideale oplossing.

Compatible voor meer dan 60 implantaatsystemen en wortelkappen 'alphatech (Henry Schein), Ankylos C/X (Dentsply Implants), BoneLevel (Straumann), Brånemark (Nobel Biocare), Bredent Sky (Bredent Medical), BTI (BTI), Camlog (Camlog), Conelog (Camlog), FairImplant (FairImplant), Neoss (Neoss), Nobel Replace Trilobe Innenverbinding (Nobel Biocare), OT-F2 + OT-F3 (OT Medical), OsseoSpeed TX (Astra Tech / Dentsply Implants), Screw-Vent (Zimmer Dental / Zimmer Biomet), Straumann (Straumann), XIVE / Frialit-2 (Dentsply Implants) Medicon.'

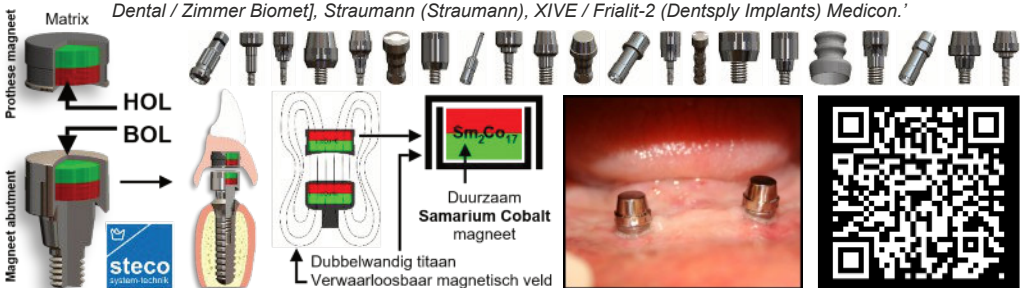



InovaPrint Wash

Speciaal ontwikkeld voor het veilig en effectief reinigen en verwijderen van resten ongepolimeriseerde **3D-printharsen**.

Printharsen met een reeks SLA-, DLP- of LCD 3D-geprinte objecten. **385 – 420 λ**

InovaPrint is: bijna reukloos ⊗ niet vluchtig ⊗ (emulgeert) mengt niet met hars ⊗ 3x productiever dan conventionele **isopropanol** (hars valt eruit en vestigt zich niet op de bodem) ⊗ herbruikbaar (nooit witte resten op de bedrukte oppervlakte) ⊗ na het reinigingsproces zijn geen verdere stappen nodig!



1 ltr InovaPrint wash

€ XX,xx


Art.nr: HP-220-1000

5 ltr InovaPrint wash

€ XXX,xx

Art.nr: HP-220-5000

Individuele
afdruklepel

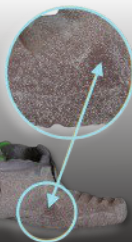

1 ltr.

TIP

5 ltr.

CAD/CAM: PrintROCK - 3D vloeistof

PrintROCK - Lichtuithardende kunststof

Voor de uiterst nauwkeurige productie van modellen met behulp van 3D-printtechnologie. *by Nis Rehfeldt*

Zeer vergelijkbaar met gips bij verdere verwerking. Frezen/boren zonder smeren of splinteren.

- Scanbaar.
- Inhoud: 1000 gr.
- Kleuren: grijs, wit of ivoor

Vrij van BPA und TPO

BPA (Bisfenol A) chemisch hormoonverstorende stof
TPO (Tris(2-butoxyethyl)fosfaat) is een weekmaker

TIP



1000 gram

€ XX,xx

LET OP!! **GEEN** meerstuks voordeel



Art.nr.:
Grijs: 28103010
Wit: 28101010
Ivoor: 28102010

NIEUWE kleur
Goud: SW10006
€ xx,- (1000gr)



GRIJS

IVOOR

Compatible met veel merken!

Meer info? **SCAN qr-code**

Anycubic, Ackuretta, Asiga®, Elegoo, Nexa3D, Microlay, MiiCraft, Phrozen, Rapid Shape, RayShape®, SHINING 3D®, Sisma, Zortrax

Sprint

ARTICULATIE GIPS

20 kg



Laagste uitzetting voor meer precisie bij het articuleren. Hogere eindhardheid voor randstabiele split-cast. Romige, stevige consistentie. Snelle instelling. Supergladde oppervlakken. Kleur: sneeuw wit

Mengverhouding 100 gr.: 30 ml. water

Meng tijd: 20 sec.

Hardheid 70 N/mm²

Verwerkingstijd: 3 min.

Expansie DIN: 0,03%

€ XX,xx

Art.nr: K4-03101200

STAR

Hardheid 120 N/mm²

Expansie 0,15 %

25 kg

Vanille

Art.nr: K4-04340250

Groen

Art.nr: K4-04370250

Wit

Art.nr: K4-04390250

Geel

Art.nr: K4-04350250

Blauw

Art.nr: K4-04310250

€ XX,xx



Vanilla STAR



Green STAR



White STAR



Yellow STAR



Blue STAR

Verwerking: 5 min.
Ontvormbaar: 15 min.

Model gips

KFO gips

Hardheid 160 N/mm²

Expansie 0,1 %

20 kg

Art.nr: K4-02501200



20 kg

Slechts € XX,xx

Hardgips - Anti-allergisch - bevat geen formaldehyde zoals al onze gipsen, Homogeen, Opaak, Tixotroop, Splintert niet, super gladde oppervlakte. **Geschikt voor:** Orthodontische modellen, werk en diagnostische modellen, evenals alle werken voor een hogere oppervlaktehardheid (kunststof techniek / reparatie-modellen / tegenbeten / persen.). **Kleur:** Super-wit

Mengverhouding 100 gr.: 27 ml. water

Meng tijd: 30 sec.

Hardheid 160 N/mm²

Verwerkingstijd: 4½ min.

Expansie DIN: 0,1%



Scan QR code
voor de webwinkel

Vario Plus

Hardheid 180 N/mm²

Expansie 0,08 %

25 kg

→ ●
Kleur: Mint

Art.nr: K4-2107250

→ ○
Kleur: Wit

Art.nr: K4-2101250

→ ●
Kleur: Mocca

Art.nr: K4-2113250



- Verpakking: 25 kg
- Superhardgips
- Gladde oppervlakte
- Romige substantie
- Verhoogde randstabiliteit
- Splintervrij zagen/slijpen
- Hoge eindhardheid
- Verwerkingstijd: 7 min.

€ XXX,xx

Model gips

RockSTAR

Hardheid 320 N/mm²

Expansie 0,06 %

20 kg

→ ●
Kleur: Creme

Art.nr: K4-1120200

→ ○
Kleur: Licht grijs

Art.nr: K4-1122200

→ ●
Kleur: Goud bruin

Art.nr: K4-11242200

→ ○
Kleur: Naturel

Art.nr: K4-1123200



- Verpakking: 4 x 5 kg
- Scanbaar - opaak
- Gladde oppervlakte
- Geringe expansie
- Grootte precisie
- Verhoogde hardheid
- Verhoogde randstabiliteit
- Afbindexpansie na 2 uur afgesloten

€ XXX,xx

Stone gips

Alginaat + Alginaat oplosmiddel



Fast Alginaat chromatic: 3-fase kleur indicatie!

ONGEACHT WATER-TEMPERatuur

Luchtbel-vrij en klont niet!

De Fast alginaat chromatic, zorgt voor een uiterst stabiele en exacte detailweergave met een super fijne korrelstructuur.

Art.nr: 722248-5

mond duur 40sec,
totale afbint tijd 2min.



**5 zakjes alginaat
inclusief 1 kg
alginaat oplosser**

€ XX,xx

L-F43

Dupliceergel



Ideale dupliceergel speciaal voor gips

Kleur: **roze**

Verpakking: **6 kg**



Herbruikbaar



€ XX,xx

Art.nr: DFS28029

Diamantschijven incl. mandrel

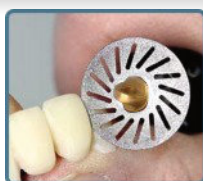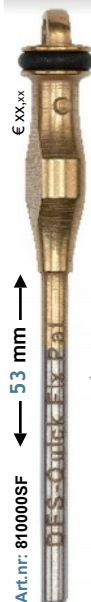

Ultra dunne 'gegalvaniseerde' diamant
separatie schijven **INCLUSIEF** een super
efficiënte mandrel met snel-koppeling.
De schijven zijn hierdoor eenvoudig, snel
en makkelijk te wisselen.

De Smart Fox mandrel is voorzien van een rubberse ring welke
voor extra grip van de diamantschijf zorgt.

Eenvoudig losdraaien met 2 vingers!



SET prijs

€ XX,xx

Aanbieding SET 5 x *diamantschijf
1 x Smart Fox mandrel

0,19mm ■ Grof
0,17mm ■ Fijn
0,10mm ■ Extra fijn

snelkoppeling

53 mm

Art.nr: 810005F

Ø 22mm

Art.nr: 1122145SF
Art.nr: 1222145SF
Art.nr: 1422215SF

Ø 22mm

Art.nr: 1822215SF

Ø 22mm

Art.nr: 1922215SF

Ø 22mm

Art.nr: 1852215SF

Ø 22mm

Art.nr: 1862215SF

SuperPeg II

Smeedbaar, zeer hittebestendig bak- materiaal/pasta voor individuele stabilisatie bij keramiekwerkstukken tijdens het bakproces.



Te gebruiken tot **1300°C**
zonder verbrossen

Cartridge á 12 ml



4 stuks (art.nr 8510) € xx,xx

Art.nr: HP-8505

€ xx,xx



TAC GEL

Met Tac Gel kan volkeramische restauraties (facings/inlays) op het werkmodel of stomp bevestigd worden voor slijp of polijstwerkzaamheden.



Cartridge á 10 gram

Verbrand zonder aanslag en verkleuring

Tijdelijk hechtmiddel voor: keramiek - kunststof - metaal op het gipsmodel.

Art.nr: K4-11601000

€ xx,xx



Power bloc M



Lichtuithardend kunststof voor modelleren en uitblokken. Tijdelijk vastzetten of aanhechten van hulponderdelen, makkelijk te frezen, viscositeit medium vloeibaar

Verbrand restloos (zonder residu) in de oven.



Cartridge á 2 ml

Art.nr: K4-19102000

€ xx,xx



Diamant pasta

Hoogglans-middel

€ xx,xx

Polijst: - Keramiek - Zirkonium LiSi2 - Titanium - RVS (edelstaal) - Platinum (950)

Art.nr: 11701000



Extreem hoog aandeel diamant



20 gr.

Incl. 1 geitenhaar borsteltje Ø 19mm

Keramiek vloeistof

3K-Liquid 1 vloeistof voor alle merken!

€ xx,xx

Art.nr: 310250

- Makkelijker modelleren
- Compatibel voor alle soorten keramiek poeder
- Kan vochtiger opbouwen/modelleren, keramiek blijft beter staan
- Droogproces is trager en gelijkmatiger daardoor minder krimp
- Door beter water-balans verdwijnt de vloeistof volledig bij het bakproces
- Geen vergrijzing.
- Beter hechtting en beter eindresultaat

Keramiek vloeistof voor VMK en vol-keramiek



250 ml.

Perfekte opbouw



Lappenschijf 'voor'polijsten met puimsteen

Lange levensduur!



9-laags

**Nieuwe manier van voor-
polijsten met een lappenschijf**

Geïmpregneerd puur katoen (micro vezel)

Geschikt voor het snel voorpolijsten
van o.a. prothese kunststoffen.

Rafelt niet en pilt niet

Afmetingen:

2 stuks slechts € XX,xx

Ø 100mm x 8mm

Voor optimaal resultaat, gebruik hierbij ons puimsteen!




1 x lappenschijf

€ XX,xx

Art.nr: PO-1001/8-H

Polijstborstels 'voor'polijsten met puimsteen

Ø 80mm

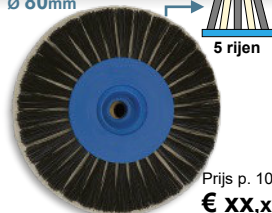

Prijs p. 10 st.
€ XX,xx

Ø 80mm



Prijs p. 12 st.
€ XX,xx

Chungking
1 rij


Ø 51mm



Prijs p. 12 st.

€ XX,xx

Ø 50mm

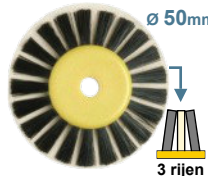

3 rijen



Prijs vanaf

€ XX,xx

Art.nr's: HA-P086

HA-121 51

HA-5250

Lappenschijf 'voor hoogglans'polijsten met glansmiddel

Lange levensduur!



14-laags

**Nieuwe manier van glans-
polijsten met een lappenschijf**

Geïmpregneerd puur katoen (micro vezel)

Geschikt voor het op hoogglans
brengen van o.a. prothese kunststoffen.

Rafelt niet en pilt niet

Afmetingen:

2 stuks slechts € XX,xx

Ø 100mm x 8mm

Voor optimaal resultaat, gebruik hierbij ons hoogglansmiddel!



1 x lappenschijf

€ XX,xx

Art.nr: PO-1001/8-W

Hoogglans SET

flaneldoek

Ø 100mm



20-laags

Prijs p. St.
€ XX,xx



125ml

**1 Hightech lappenschijf +
flesje hoogglans emulsion**

Deze combinatie SET is voor alle dentale
materialen geschikt waaronder kunststof,
composiet, titaan, NEM,
edelmetaal en
zorgt voor de
ultieme hoogglans.

Prijs p. st.
€ XX,xx



Hoogglans SET

€ XX,xx

Art.nr: HA-161 pstar

Art.nr's: HA-161 100/20

HA-313139

Polijsters **NEW**

Ca. Ø 26 mm
Ca. Ø 3 mm

Art.nr: DFS800605
Art.nr: DFS800606

Flexibele en zeer slijtvaste Non-woven instrumenten voor het ontbramen en gladmaken van zachte materialen, kunststoffen, spaken en ondersteunende bevestigingen in 3D-printen.

6.000 / 20.000 rpm

Verpakking
10 schijven
1 mandrel

€ XX,xx

Palatinal borstel

Ca. Ø 35 mm

1 stuk

€ XX,xx

Art.nr: 121 35

Ca. 68 mm
27 mm



Upofix HP - fijn

Geschikt voor vrijwel alle tandheelkundige materialen.
Verwijdt eenvoudig was van kunststof tanden.


2000-3000 rpm hoge contactdruk: **lichte afname**
3000-5000 rpm lage contactdruk: **glanspolijst**


Fijne korrel structuur

Verpakt per: 5 stuks
Art.nr: DFS802249

€ XX,xx

Ca. 21 mm

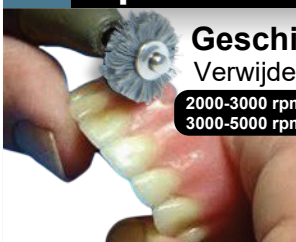

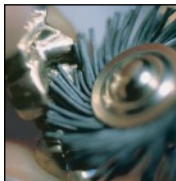

Upofix HP - super fijn

Geschikt voor vrijwel alle tandheelkundige materialen.
Verwijdt eenvoudig was van kunststof tanden.

2000-3000 rpm hoge contactdruk: **lichte afname**
3000-5000 rpm lage contactdruk: **glanspolijst**

Super fijne korrel structuur

Verpakt per: 5 stuks
Art.nr: DFS802259

€ XX,xx

Ca. 21 mm





Desinfectie WIPES XXL

Gebruiksklare, aldehyde- en alcoholvrije hygiënische wipes (doekjes) met een breed werkgebied in de medische industrie voor het desinfecteren van alle oppervlakken en objecten rondom patiënt, evenals oppervlakken in overige industrie waaronder de voedingssector.

Geschikt voor alcohol-gevoelige oppervlakken

Verpakkingen:

- bewaarbox + vulling
- vulling á 70 XXL wipes

Afmeting(en) wipes: 29 x 30 cm

Viruswerkzaamheid (EN14476)

Bactericide tegen MRSA, TB enz. Fungicide (C.albicans) enz. Effectief werkzaam tegen HBV/HCV/HIV/BVDV en alle Rota- en Noro virussen, Influenza virussen (H1N1) bacteriedodend, levurocidaal EN 16615 (hoge blootstelling) **1 min.**

Navulling € XX,xx
Art.nr: DD-601109



HUISMERK



Bewaarbox + vulling

€ XX,xx

Art.nr: DD-601108

Uitwerk schijven

Universeel middel-schurende schijf met een lange levensduur. De extra stevig geperste homogene schijf is voor veel toepassingen geschikt.

Deze schijf heeft een uitstekende materiaal afname bij alle type zachte en harde soorten kunststoffen/silicone.

Ook verkrijgbaar in Maxi SET € xxx,xx (100 schijven + 1 mandrel)

Eigenschappen:

- Schijf Ø 22mm
- Schijf dikte 3mm

Mini SET:

- 10 schijven
- 1 mandrel



Optimaal / Max.: 8 - 12.000 / 20.000



HUISMERK



1 x Mini SET

€ XX,xx

Art.nr: PO-5998M



ERKODENT®



Liskosil-I



Fijnschurende polijstschiif, extra lange levensduur, fijn tot grof (gedoseerde) materiaal afname. Door de aandrukkracht te verhogen wordt veel materiaal verwijderd. **Resultaat:** altijd een fijn, licht matte oppervlakte waardoor een hoogglans polijst in veel gevallen overbodig is.

Verpakking: 6 stuks (per type) inclusief 1 mandrel
Dieptrekmaterialen, gedrukte en gefreesde kunststoffen, metalen en siliconen.

Prijs á 6 stuks vanaf

€ XX,xx

S Art.nr: 223 220

M Art.nr: 223 230

L Art.nr: 223 240

Lisko-S



Halfopen, gestabiliseerde structuur polijstschiif. Voorpolijsten en bewerken van zacht en het voorpolijsten van harde dieptrekmaterialen. Minimaal vier keer de levensduur van Lisko wit en maakt met zijn fijne korrel zowel verwijderen, afronden als egaliseren mogelijk.

Verpakking: 10 stuks, 4 steunschiifven, 1 mandrel

Prijs per 10 stuks

€ XX,xx

Art.nr: 223 200

Optimaal / Max.: 5.000 / 10.000 rpm

Zacht relinings-materiaal

Zachtblijvend bio compatibel prothese rebasings materiaal op A-siliconenbasis.

Voor directe en indirecte verwerking.

Direct in de mond of op het gips model!

De speciale adhesie leidt tot een vaste moleculaire verbinding van de A-siliconen met het heet- of koude polymeriserende prothese materiaal op methacrylaat basis.



Verpakking
• 1 x 50ml cartridge
• 6 x mengtips

Los verkrijgbaar:
1 x 5ml adhesief € XX,xx
Art.nr: PUA4020

Shore A 27



1 cartridge + 6 tips

€ XX,xx

Art.nr: PUK4010

Hard relinings-materiaal

Permanent hard reliningmateriaal op acrylaatbasis (methacrylaat). Het is vrij van methylmethacrylaten en wordt goed verdragen. Sterke hechting en een hoog draagcomfort gegarandeerd.

Geïndiceerd voor de bekleding van kunstgebitten, reparaties van kunstgebitten en om de effecten van oppervlakteverslechtering van de prothese te compenseren.



Zeer lage warmteontwikkeling tijdens de intraorale setting. Uitstekende verwerkbaarheid en polijstbaarheid.

Verpakking SET:
• 1 x mengspuit á 10ml • 5 x mengtips
• 1 x 3ml adhesief

Snelle vervaardiging van kunstgebitten aan de stoel en in het laboratorium.

Shore: A 70




1 x SET

€ XX,xx


Art.nr: PUMA5000

Snel en eenvoudig verwijderen van soft-tisseu

1 stuk € XX,xx
6 Halen = 5 Betalen

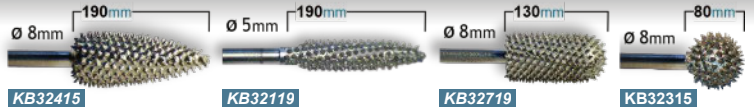

Polijst instrumenten voor alle soorten kunststof

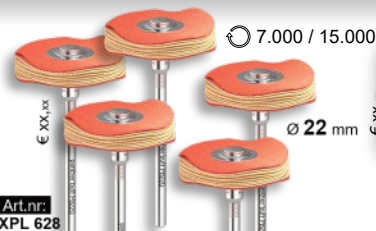

Art.nr:
XPL 628

Ultieme hoogglans SET



Afm.: 45x23x23 mm
Art.nr:
XPL Paste02/40

Met het handstuk elk type kunststof oppervlakte op hoogglans brengen

SET: 1 polijstblokje + 5 handstuk polijster

1 x SET

€ XX,xx

Art.nr: XPL 628/Paste

Desinfectie LIQUID - pro

HUISMERK

Oppervlakte: Alcohol-vrij snel-desinfectie.

Voor het reinigen en desinfecteren van alle water-bestendige medische oppervlakken, objecten, instrumenten, afdruklepels en alle afdrukmaterialen zoals:

Siliconen, Hydrocolloïde, Alginaat

Vernietigt 99,99 % van alle ziekte-kiemen binnen één minuut. Is huidvriendelijk dus ook geschikt voor diegene met een allergie.



1/2 liter
€ X,xx
Artikel nr:
DD-720880

1 liter
€ XX,xx art.nr. DD-720881



5 LTR. SLECHTS

€ XX,xx

Art.nr: DD-720885

Reinigings setje

HUISMERK



In de **mini ultrasonic** met zijn ca. 17.000 trillingen per minuut wordt elke prothese binnen de kortste tijd schoon, zelfs tandsteen, nicotine en andere verkleuringen hebben in de mini ultrasonic geen schijn van kans.

Het bijpassende reinigings poeder is chloorvrij, bleekt de prothese-kunststof niet en tast de weekmaker in de prothese niet aan zoals de meeste andere prothese- reinigings middelen wel doen.



Inhoud SET: 1 x reinigings-apparaat
2 x zakje reinigings-poeder incl. mini borsteltje



1 x SET

€ XX,xx

Art.nr: DH-0011

Reinigings apparaat - 24W, 220-240V

HUISMERK

UV-C-licht: desinfecteert / steriliseert

ACTIE: 10 reinigings apparaten 24W € XXX,-



Ervaar de superieure reinigings-mogelijkheden van onze nieuwste compacte ultrasonic apparaat.

De ultrasonic dringt diep door in de spleten van het kunstgebit en verwijdert efficiënt verontreinigingen zonder schade aan te richten. Heeft maar liefst **42.000 trillingen** en een **UV-C-licht** in de deksel, is bovendien zeer gebruiksvriendelijk in gebruik.

1 x stuk

€ XX,xx

Art.nr: 720019

5 min. timer Afmetingen reinigings apparaat: H90 x B120 x D100 mm Inhoud RVS tank tot 200ml

Reinigingsconcentraat poeder

welke zich kenmerkt door zijn bijzondere receptuur.

Door het vermijden van zogenaamde 'actieve zuurstof' worden de hooggepolijste delen van uw kunstgebit niet beschadigd of aangetast. Ook worden de kunststoffen niet gebleekt en blijven ze esthetisch. In tegenstelling tot andere producten verwijdert ons reinigingsconcentraat: **tandsteen, rookaanslag, plak, koffie-, thee- en rode wijnvlekken.**



zakjes á
7 gram



GRATIS doosje á 12 zakjes reinigings-concentraat poeder bij 2 reinigings apparaten 24W

1 doosje á 12 zakjes

€ XX,xx

Art.nr: DH-0013

SilaPoli



Beste anti-bacterieel voorpolijstmiddel ...
dat zoals puimsteenpoeder verwerkt
wordt. **SilaPoli** is superieur ten opzichte
van de normale puimsteenpoeder.

Polijst sneller en zorgt voor nog meer glans!

Voordelen: Geen silicose risico zoals bij puimsteen + Anti-
bacteriële werking, geen vieze geur meer! + Hoge abrasieve
werking + Super gladde oppervlakte + Voordeliger en zuinig
in gebruik door meer volume (per gewicht) + Anti allergisch

HUISMERK




10 KG SLECHTS

€ XX,xx

Art.nr: DK-72010

SilaPoli Liquid

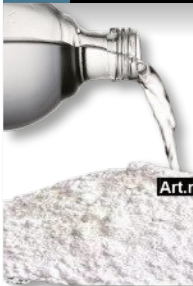

SilaPoli Liquid is een desinfecterende vloeistof,
dood bacteriën, zorgt dat de puimsteen langer vochtig
blijft en beter aan de borstel hecht. De vloeistof is
handverzorgend en heeft een
subtiële appelgeur.

5 LITER

€ XX,xx

Art.nr: DK-72009-5



Voor elke puimsteenpoeder geschikt,
**optimaal resultaat met
onze SilaPoli puimsteen!**

HUISMERK



1 liter

€ X,xx

Art.nr: DK-72009-1

Turbosil Blue



De originele 'Additionsvernetzendes' 1:1 dupliceer silicoon
...luchtbel vrije verwerking voor een exacte en een nauw-
keurige detail weergave. Stabiël, scheur vast, flexibel, vorm-
vast, 100% krimpvrij, 100% homogeen.

Geschikt voor alle dupliceer doeleinden: met manchet of in kuwet

Spaarzaam doseren door de handige
liter fles verpakking met schroefdop.

Geschikt voor dupliceerdoseer-apparaat.

10 kg. (5 + 5 kg)

€ XXX,xx Art.nr: 720010Turbo

- Dichtheid: 1,1 g/cm³
- Mengtijd: ca. 25 sec.
- Verwerkingstijd: ca. 2½ min.
- Uitharding : binnen 10 min.
- Ontvormbaar na: ca. 12 min.
- 1:1 mengverhouding A en B

Hardheid:
SHORE 23

HUISMERK



2 kg. (1 + 1 kg)

€ XX,xx

Art.nr: 72002Turbo

SilaPutty

De originele 1:1 SilaPutty.

Superieure eigenschappen,
voor exacte detail weergave!

- Soepel kneedbaar
- Plakt niet aan de handen
- Makkelijk doseerbaar
- Vorm- en kookvast
- 100% homogeen

**Bevat geen vul-materiaal
of schadelijke inhoudsstoffen.**



Shore:
85 - 90

SilaPutty standaard art.nr's:

- 4kg.: **72004** € XX,xx
- 20kg.: **720020** € XXX,xx
- 50kg.: **720050** € XXX,xx

SilaPutty soft art.nr's:

- 4kg.: **72004-S** € XX,xx
- 20kg.: **720020-S** € XXX,xx
- 50kg.: **720050-S** € XXX,xx

SilaPutty soft is extra zacht kneedbaar met dezelfde shore hardheid als SilaPutty standaard

HUISMERK



4 KG VANAF

€ XX,xx



Prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) & transportkosten, zet- en drukfouten onder voorbehoud. Aanbiedingen zijn NIET geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties of persoonlijke prijs-afspraken. Aanbiedingen zolang voorraad strekt en geldig t/m 30-11-2025. Product afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Algemene leveringsvoorwaarden: <https://www.dentalsil.com>.



<https://www.dentalsil.com/webwinkel>

DENTALSIL®



[dentalsil.com](https://www.dentalsil.com)



info@dentalsil.nl



0495-651214



0495-652474