

DENTALSIL®

DENTIST & LABORATORY PRODUCTS

DeLonghi

Check pg. 5



Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
14		1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30				

Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
18				1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	

Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
22	30						1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29

■ 20+21 april: Pasen ■ 26 april: Koningsdag ■ 5 april: Bevrijdingsdag ■ 29 mei: Hemelvaartsdag ■ 8+9 juni: Pinksteren

SilaPutty

HUISMERK

De originele 1:1 SilaPutty

...met superieure eigenschappen, voor een exacte detail weergave!

Onze putty is de enige echte twee componenten silicoon, gegarandeerd zonder tetraethylsilicaat. Geen handschoenen meer nodig, plakt niet aan de handen, is soepel kneedbaar en makkelijk te doseren. Bovendien is onze SilaPutty scanbaar (voor de meeste optische scanners), kookvast, vorm-vast, 100% homogeen en zuinig in gebruik.


Bevat geen vul-materiaal of schadelijke inhoudsstoffen!



10 kg (5 kg + 5 kg)

€ XXX,xx

Art.nr: 720010

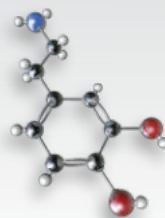

Mengverhouding: **1:1**



Introductie van een nieuwe verpakke-eenheid.

10 kg (5kg A + 5kg B)

Introductie DEAL

€ XXX,xx

Shore:
A 90

TIP

Meng-tijd	Verwerkings-tijd	Uithard-tijd
30 sec	90 sec	240 sec

Superieure eigenschappen, voor exacte detail weergave!

- Soepel kneedbaar
- Plakt niet aan de handen
- Makkelijk doseerbaar
- Vorm- en kookvast
- 100% homogeen

SilaPutty standaard art.nr's:

- 4kg.: 72004 € XX,xx
- 10kg.: 720010 € XXX,xx
- 20kg.: 720020 € XXX,xx
- 50kg.: 720050 € XXX,xx

SilaPutty soft art.nr's:

- 4kg.: 72004-S € XX,xx
- 20kg.: 720020-S € XXX,xx
- 50kg.: 720050-S € XXX,xx



Voorbeeld verpakke-eenheid

**4 kg SilaPutty =
2 kg A + 2 kg B**

SilaPutty soft is extra zacht kneedbaar met dezelfde shore hardheid als SilaPutty standaard

Disposable scalpel (steriel) - met veiligheidssluiting

Voorkomt scherpe verwondingen.

Gebruiksvriendelijk
Ergonomisch en veilig
Premium kwaliteit

NEW



10 doosjes

€ XXX,xx

Art.nr: Ki-12911




Wordt geleverd
met het mesje
type 11 en/of 23

Sandvik grade 13C26

Zweeds roestvrijstalen mes

PRESS TO DISPOSE ↑

Latexvrij

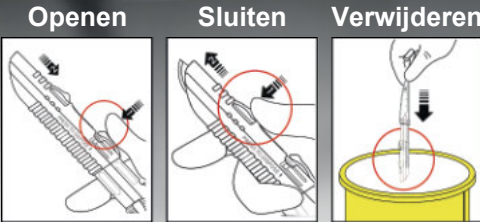

Steriele wegwerpveiligheidsscalpel met intrekbare huls.
De juiste keuze om u te helpen voldoen aan de OSHA-richtlijnen.
Permanente vergrendeling voor veilige verwijdering.

- Steriel verpakt
per 1 stuk
- Doosje
á 10 stuks

RVS scalpel - met veiligheidssluiting

Lengte scalpel houder: 13 cm

**Veilig
systeem**

12 x mesje 11

12 x mesje 15

12 x mesje 23

SET: scalpelhouder inclusief
36 mesjes (type 11, 15 & 23)

- 1 - klip openen
- 2 - mesje inschuiven
- 3 - klip sluiten



Art.nr houder:
47-13

Art.nr mesjes:
47-12




1 x SET

€ XXX,xx

Art.nr: 47-Set

Penselen

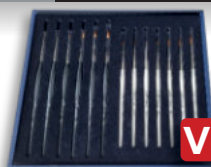

Vernieuwd Beste kwaliteit - voordelig prijs

Zwart handgrip; Hoogwaardig, puur Kolinsky natuurlijk haar met de fijnste punten en een hoge vloeistofopname. Zeer goede vormvastheid ("memory effect")

Greepvorm: ergonomische driehoekige greepzone, penseel kan niet weggrollen.



Prijs vanaf

€ XXX,xx

Art.nr: Divers

Wit handgrip; Hoogwaardig synthetisch haarmengsel van verschillende vezeldiktes en een zeer fijne punt. Elasticiteit en applicatiegedrag zijn gemodelleerd naar natuurlijk haar, zeer hoge dichtheid

16,0cm	MZ00	€ XX,xx
16,0cm	MZ0	€ XX,xx
16,5cm	MZ2	€ XX,xx
16,5cm	MZ4	€ XX,xx
17,0cm	MZ6	€ XX,xx
17,0cm	MZ8	€ XX,xx
16,0cm	SP02	€ XX,xx

18,0cm	TK00	€ XX,xx
18,0cm	TK0	€ XX,xx
18,5cm	TK2	€ XX,xx
19,0cm	TK4	€ XX,xx
19,0cm	TK6	€ XX,xx
19,5cm	TK8	€ XX,xx

TriVest-CAM refractory disc

Terwijl de markt voor esthetische veneers blijft groeien, is analoge productie nog steeds niet economisch!! De digitale processen laten weinig creatieve, esthetische vrijheid toe bij de productie van fineer!

Met TriVest CAM maakt u gebruik van de efficiëntie en precisie van digitalisering en combineert u deze met uw individualiteit.

Digitale precisie
Snelle werkstroom
Onverslaanbare werkbasis

Ø 98,5 / 25 mm



1 stuk

€ XXX,xx

Art.nr: 224-2500

Schuren – laagjes – klaar!

"De'Longhi" PrimaDonna Soul - volautomatische espressomachine



Met maar één druk op de knop bereid je de grootste verscheidenheid aan drankjes. Tot 21 drankjes, waaronder Espresso, Flat White en Over Iced.



Coffee Link app



Verbind je mobiele apparaat met de machine.

Binnen enkele tikken is de machine klaar om jouw perfecte kopje koffie te zetten.

Super snel een heerlijk kopje koffie zetten, eenvoudige bediening, extra stil, ongelooflijk veel functies. "De'Longhi" n°1 beste espressomachine!



Snel en makkelijk melk bijvullen.

- Geïntegreerd en verwijderbaar thermisch melkreservoir met LatteCrema systeem met een capaciteit van 0,5l.
- Geïntegreerd Automatic Clean Functie.



Koude koffiedranken
Over Ice

LatteCrema-systeem: Met dit systeem kun je recepten op basis van melk bereiden. Mengt stoom, lucht en melk in de juiste verhouding, voor het best mogelijke schuim rechtstreeks in jouw kopje. Je creëert hierdoor de perfecte cappuccino met constante dichtheid, romige schuim en de juiste temperatuur.

Bean Adapt-technologie

Het is de ultieme innovatie van "De'Longhi" voor het bereiden van de perfecte koffie. De Bean Adapt-technologie past de instellingen van de machine aan op basis van de door jou gekozen koffiebonen. Het balanceert het maalniveau, de hoeveelheid koffie en de infusietemperatuur om de perfecte koffie-extractie te garanderen, terwijl de typische smaken en aroma's van de koffievareteit behouden blijven en worden geëxtraheerd. Het ware aroma van jouw koffiebonen. De perfecte koffie-extractie behoudt alle koffie-aroma's zodat je kunt genieten van de meest aromatische en smakelijke koffie.

Bij een minimale besteding van slechts € xx,- uit het hele assortiment van Dentsil ontvang je van ons een persoonlijke kortingscode van **xx%** voor de "De'Longhi" Prima Donna Soul volautomatische espressomachine. Direct bestellen of wilt u meer informatie hebben... check onze website:


<https://dentsil.com/delonghi>

Scan QR code voor meer info





Kunststof slijpschijven

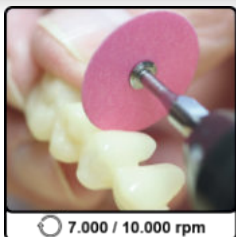

7.000 / 10.000 rpm

Flexibele dunne kunststof slijpschijfjes met aan één zijde een coating. Ideaal voor het verwijderen/bewerken van contouren en gladmaken van kunststoffen en composieten.

Verkrijgbaar in 3 korrel grofheden.



1 x Starter SET

€ XXX,xx

Art.nr: 800558

Starter SET:

- 5 schijfjes fijn (kleur wit)
- 5 schijfjes middel (kleur blauw)
- 5 schijfjes grof (kleur roze)
- 3 mandrellen



NEW
50 slijpschijven
per grofheid/kleur
incl. 1 mandrel

€ XX,xx

0,2 mm




Fijn

Art.nr: 800548

Ø 22 mm

0,25 mm

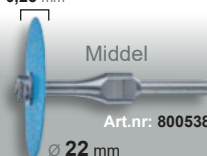


Middel

Art.nr: 800538

Ø 22 mm

0,3 mm

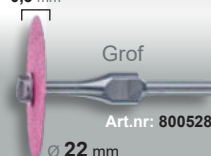

Grof

Art.nr: 800528

Ø 22 mm

Matrixboor

Voor het doorboren van de matrix en het nauwkeurig fixeren van de kunststof tanden.

15.000 / 20.000



VOORBEELD



6 halen =
5 betalen



Ø = 6 mm



1 x stuk


€ XXX,xx

Art.nr: 91020

Mini TriZir Cutter



5.000 / 10.000 rpm

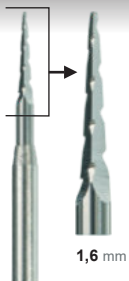

1,6 mm

Snel en heel eenvoudig verwijderen van de verbindingsteggen in krijtfase zonder het vollopen van de frees.

6 halen =
5 betalen



1 stuk

€ XXX,xx

Art.nr: 80059Zir

Reinigings apparaat - oplaadbaar

HUISMERK
UV-C-licht: desinfecteert / steriliseert
**GEAVANCEERDE
ULTRASOONTECHNOLOGIE**

1 x stuk

Meerstuks voordeel
10 stuks: € xxx,-

€ XXX,xx

Art.nr: 72-0019

RVS tank
TIP
**UV-C-
licht**

NEW
5 min. timer
**Korf
uitneembaar**

Ervaar de superieure reinigungs-
mogelijkheden van onze nieuwste
DRAADLOZE / OPLAADBARE
compacte ultrasonic apparaat.

24w

De ultrasonic dringt diep door in de
spleten van het kunstgebit en verwijdert efficiënt verontreinigingen zonder schade
aan te richten. Heeft maar liefst **42.000 trillingen** en een **UV-C-licht** in de deksel,
is portable en bovendien zeer gebruiksvriendelijk in gebruik.

Afmetingen: H90 x B120 x D100 mm Inhoud RVS tank tot 200ml
**USB-C
aansluiting**
42.000 kHz
**Leverbaar vanaf
begin mei 2025**

Reinigings apparaten - 220-240V

**Voor professionele verzorging van uitneembare kunstgebitten,
beugels, tandenborstel-opzetstukken en nog veel meer...**

Alles wat u nodig heeft om uw kunstgebit hygiënisch en grondig te
reinen. Compact apparaat waarbij de geluidsgolven zeer efficiënt
over het hele gebied werken. De trillingen, veroorzaakt door ultrasone
golven, maakt dat vervuiling los van het oppervlak komt.

Ultrason reinigt zacht en grondig met 42.000 trillingen/sec.



1 x SET

€ XXX,xx
Beide apparaten hebben bijna dezelfde eigenschappen, zie specificaties
Type A

Art.nr: DH-0018

**3 min.
timer**

Inhoud:
210ml (max)

Vermogen: B 12
22W H 12
220-240V D 18 cm

**Uitneembare
reinigungs korf**

B 21 x H 15 x D 15 cm

1 SET = 1 reinigungs apparaat
2 zakjes reinigungs concentraat
1 prothese borstel

Type B

Art.nr: DH-0017

Inhoud:
500ml (max)

Vermogen:
35W
220-240V


Explosieveilige afzuigkast

Artnr.: ASEX420

Voor Isopropanol en andere
reinigingsmiddelen voor resins
printvloeistoffen

NEW

Voor verder
gaande info
kunt u graag
contact met
ons opnemen.



Afmetingen kast:
B 1000
H 1290
D 500 mm

 Deze afzuigkast 'made in Germany' voldoet ruimschoots aan alle wetten en eisen (BGR 120 Abs.5.3.1.1) van de Duitse beroepsvereniging voor labo apparatuur. Is CE gecertificeerd en heeft het keurmerk voor explosie beveiliging (ATEX 2014/34/EU Zone 2). Deze afzuigkast heeft over de **hele breedte van de kast afzuigingen voorin** + afzuigingen boven- en achterin. Dit is nodig omdat Isopropanol zwaarder is dan lucht en naar de bodem zakt. Een klein vonkje kan dan tot een explosie leiden. **GOED OM TE WETEN:** bij een isopropanol explosie bent u en uw laboratorium NIET verzekerd! Isopropanol is extreem gevaarlijke en een explosieve vloeistof welke tevens zware schade aan de gezondheid kan toebrengen.

Waterzuigpomp

Verwijder het deksel van de gipsafscheider. Dompel de pompslang in het resterende water en hang de flexibele slang in een aparte bak. Door de pomphendel op en neer te bewegen wordt het water moeiteloos en effectief door de pomp via de slang in de aparte container afgevoerd. Gooi gipsresten weg zoals gebruikelijk. De slang-



1 stuk

€ XXX,xx

Art.nr: 10027



TIP

**Aluminium
versie**

Technische gegevens

Leveringsvolume 100 ml / slag
Slaglengthe 135 mm
Totale lengthe 480 mm



Gipsafscheider

De gipsafscheider is los verkrijgbaar € XXX,-
Art.nr: 10001



Slanglengthe 100 cm

Gips bindmiddel

DentaFloc elimineren 99% van alle bacteriën; onaangename geuren worden dus vanaf het begin vermeden.

De werkzame stof in de denta-floc verhindert het dichtslibben van afvoerleidingen, vereenvoudigt de reiniging van de afscheider en gaat afvoerluchtjes tegen.



25 tabletten

€ XXX,xx

Art.nr: BDT-21003

10 tabletten

€ XXX,xx

Art.nr: BDT-21002

5 liter

€ XXX,xx

Art.nr: BDT-20154

Gipsdeeltjes zinken naar de bodem van de gipsafscheider

Een must voor alle werkplekken waar gipshoudend afvalwater wordt geproduceerd.



10 of 25 TABS incl. korfje



5 liter

25 t/m 29 maart
Hall 1.2, stand A-049



Hartelijk dank voor uw bezoek aan de stand van STECO.



Ook dit jaar was er weer veel belangstelling voor de slijtage-vrije titaanmagneten voor implantaat gedragen prothese. Een systeem met ongelofelijk veel voordelen voor zowel de behandelaar als de patiënt.

Heeft u ons gemist op de IDS te Köln?, dan informeren wij u graag nog persoonlijk op locatie of telefonische over de mogelijkheden van STECO.

www.dentalsil.com/steco

SCAN qr-code



Simply at

Titan

Magnetic




Titanmagnetics



Ma
overd

Matrix

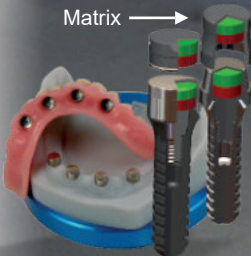


Prothese magneet

Magneet abutment voor bijna elk implantaatsysteem

Veel beter dan steggen, drukknopverbindingen zoals kogelankers of locators. Eenvoudig schoonmaken. Veilig in gebruik, de prothese is makkelijk in/uit doen, hoge fixatie-hechtkracht en zelfcenterend door het gepatenteerde unieke HOL-BOL systeem en hierdoor absoluut slijtage-vrij. Makkelijk schoonmaken door de super gladde oppervlakte.

Diamant schijfjes

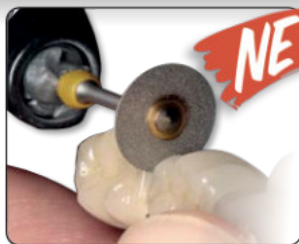

NEW

Mini diamantschijven

Schijf met **Super fijne** of **fijne** diamant korrel, gediamanteerd op beide zijden. Geschikt voor het scheiden/separeren en het contouren van **keramiek + composieten**. Schijven zijn gemonteerd en gecentreerd.



Verpakt per 1 stuk



Prijs per stuk

€ XXX,xx

5 stuks
slechts
€ XX,xx
Mixen mag

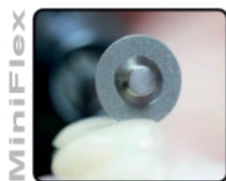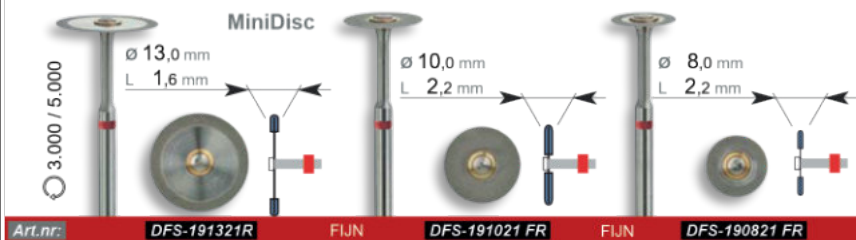

Separatie schijven - met vezels versterkt

Voor metaal met aluminiumoxide

Prijs vanaf

€ XXX,xx

Afmetingen: Ø x L

Art.nr: 654 22x03 H 22 x 0,3 mm
0,2+0,5
Art.nr: 654 25x03 H 25 x 0,3 mm
0,2+0,5
Art.nr: 654 40x05 H 40 x 0,5 mm
0,7+1,0



Voor keramiek met siliciumcarbide

Prijs vanaf

€ XXX,xx


Afmetingen: Ø x L

Art.nr: 754 22x02 H 22 x 0,2 mm
Art.nr: 754 22x03 H 22 x 0,3 mm
Art.nr: 754 25x03 H 25 x 0,3 mm
+0,2



Matrix polijstschiif

HUISMERK

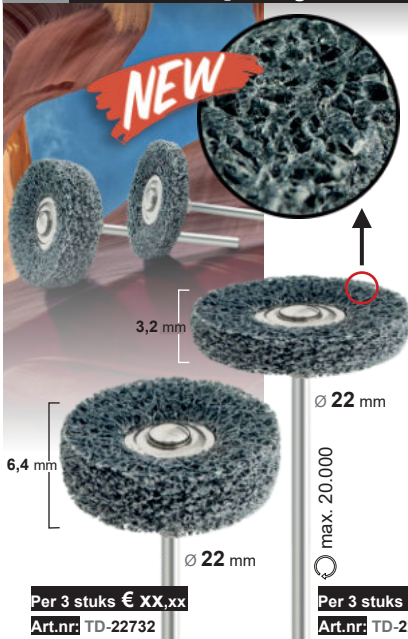

Een polijstschiif voor heel veel doeleinde geschikt.

- Zirkonioxiede/keramiek/lithiumdisilicaat
- Titanium, niet-edele/edele legeringen
- Zacht blijvende ondervoerings-materiaal
- Harde en zachte dieptrekplaten
- Peek
- 3D-geprinte modellen
- Thermoactieve kunststoffen

Geen stof- of geurontwikkeling, krasvrije en nauwkeurige afwerking met zijdeachtige glans, materiaalbesparend effect, lange levensduur.

Wat doet de schiif:

- Slijpen, glad maken van oppervlakte, uitwerken van dieptrekplaten, verwijderen van oxidelagen na solderen, reinigen van zachte reliningen, afname van hoogteverschillen (Zirkonioxiede / keramiek / lithiumdisilicaat), glad maken van overgang verschillende materialen (kunststof / metaallegeringen / titanium / keramiek / glazuurmassa)



3 Stuks vanaf

€ XXX,xx

Per 3 stuks € XX,xx
Art.nr: TD-22732

Per 3 stuks € XX,xx
Art.nr: TD-22731



Parodont creme

HUISMERK

Het meest toonaangevende natuurgeneesmiddel voor in en rond de mond!



Parodont creme is:

- Bacterie en Virus remmend/bestrijdend
- Desinfecterend • Pijn verlagend • Tegen schimmel

★★★★★
Beoordelingen 4,8 / 5

Anti allergisch
Zonder bijwerkingen



Snel herstel parodontitis na injecteren Parodont creme in de diepe pockets.

Bekijk onze product video op:
<https://www.dentalsil.com>

of scan QR-code

Parodont creme® helpt bij:

Prothese drukplekken Aften wondjes Tandvlees ontsteking Diepe pockets Teruggetrokken tandvlees Herpes koortslip Gekloofde lippen



1 Tube á 10 ml.

€ XXX,xx

Artikel nummer(s): 7210-1 (1 tube á 10 ml.) € X,xx 7210-24 (1 display á 24 tubes) € XXX,xx



CAD/CAM: PrintROCK - 3D vloeistof



PrintROCK - Lichtuithardende kunststof

Voor de uiterst nauwkeurige productie van modellen met behulp van 3D-printtechnologie. *by Nis Rehfeldt*

Zeer vergelijkbaar met gips bij verdere verwerking. Frezen/boren zonder smeren of splinteren.

- Scanbaar.
- Inhoud: 1000 gr.
- Kleuren: grijs, wit of ivoor

Compatible met veel merken! Anycubic, Ackuretta, Asiga®, Elegoo, Nexa3D, Microlay, MiiCraft, Phrozen, Rapid Shape, RayShape®, SHINING 3D®, Sisma, Zortrax



1000 gram

€ XXX,xx



LET OP!
GEEN meerstuks voordeel.

**Binnenkort MEER
CAD/CAM resins
verkrijgbaar.
SCAN de QR-CODE**



Good morning spray



Antibacteriële spray- oplossing voor gebitsprothesen op basis van A-siliconen. Remt tandplak af en vertraagt de ophoping van micro-organismen in de mond gedurende 24 uur zonder de natuurlijke mondflora aan te tasten.

Bacteriostatisch effect

Toepassing:

- Gebitsprothese inspuiten voor het afleveren aan de patiënt

Ook geschikt voor thuisgebruik. Voordat het 'schone' kunstgebit in de mond wordt gedaan, de gebitsprothese 2 tot 3 pufjes vernevelen.



**Mint
smaak**



100 ml spray flacon


€ XXX,xx

Art.nr: D-02284

Geschikt voor: Diverse soorten bitjes (splints), Diverse soorten gebitsprothese, Uitneembare beugels

CAD/CAM: instrumenten

Art.nr.
XPLSET104/01

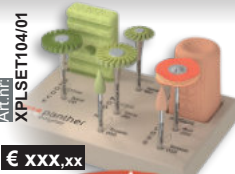

€ XXX,xx

NEW

Premium afwerking voor polymeren
Speciaal ontworpen instrumenten met optimale verwerkingseisen, geoptimaliseerd tot het hoogste niveau.

€ XX,xx

Hoogglans blok
Art.nr.
XPL Paste02/40
Afm.: 45x23x23 mm

€ XX,xx

Slijpsteen
Art.nr.
XPL 932
Afm.: 46x28x10 mm




Vanaf

€ XXX,xx

Art.nr: DIVERS

GROF: Verwijdering van groeven door het frezen of printen proces.

FIJN: Precies en nauwkeurige voorbereiding voor het op hoog glans brengen.

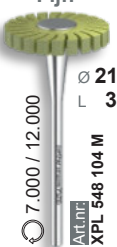Grof	Fijn	Fijn	Fijn	Glans	Ultieme hoogglans
					
Ø 21 mm L 3 mm	Ø 21 mm L 3 mm	Ø 16 mm L 3 mm	Ø 5,6 mm L 13 mm	Ø 5,6 mm L 13 mm	Ø 22 mm
7.000 / 12.000 Art.nr. XPL 548 104 C	7.000 / 12.000 Art.nr. XPL 548 104 M	7.000 / 12.000 Art.nr. XPL 547 104 M	3 stuks 8.000 / 20.000 Art.nr. XPL 111 104 M	3 stuks 8.000 / 20.000 Art.nr. XPL 111 104 XF	5 stuks 7.000 / 15.000 Art.nr. XPL 628
Per stuk € XX,xx	Per stuk € XX,xx	Per stuk € XX,xx	Per 3 stuks € XX,xx	Per 3 stuks € XX,xx	Per 5 stuks € XX,xx

CAD/CAM - 3D Model Separator PMMA

Speciaal ontworpen als isolator voor 3D-geprinte modellen.



Isoleert modellen tegen prothese en KFO kunststof. Eenvoudig middels spuitfles aanbrengen op model en laten drogen. Er ontstaat een extreem dunne isolerend film laagje. Na polymerisatie kan het werkstuk makkelijk van het model worden afgehaald met behoud van alle oppervlakte details. Het separatie middel verwijderen onder stromend water.

**Inhoud spuitfles
125 of 500 ml.**



Inhoud 125 ml

€ XXX,xx

Art.nr: 25050

Inhoud 500 ml

€ XXX,xx

Art.nr: 25040

Dentasil Final Prothese Spray

Finale Prothese Spray is de ultieme afwerking en onderhoud voor elke prothese:

- Verwijdert alle geur en residuen van rest monomeer
- Het geeft de prothese een sublieme hoogglans
- Het werkt desinfecterend
- Verhoogd de hechting van de prothese in de mond
- Het smaakt naar pepermunt en het is gemaakt van natuurlijke componenten / producten (geen chemische ingrediënten)

Eenvoudig in gebruik:

Breng de spray aan en veeg na een paar minuten af met een doek.

Mint smaak



NEW



100 ml spray flacon

€ XXX,xx

Art.nr: 3s06-015

Ook voor geprinte modellen / resins!

Geschikt voor: Diverse soorten bitjes (splints), Diverse soorten gebitsprothese, Uitneembare beugels

Hoogglans
Polijst SET

Art.nr: 862 100/15

15-laags, Ø 100mm



Art.nr: HA-313139



Voor het polijsten van o.a.:

Titanium, composiet, kunststof, modelgiet frames CoCr, niet edele legering, aluminium, brons, zilver (925), goud 8 karaat (333), goud 14 karaat (583), goud 18 karaat (750), goud 22 karaat (916), platinum (950), koper.

Verpakking SET:

3 x lappenschijf
1 x 125 ml vloeistof

€ XX,xx




Polijst borstels (machine)

Meerstuks voordeel: **24** borstels

Ø 50 mm

Art.nr: HA5250

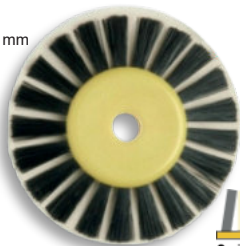

3 rijen

€ XXX,xx


TIP

Polijst borstels (machine)

Meerstuks voordeel: **20** borstels

Ø 51 mm

Art.nr: 121 51

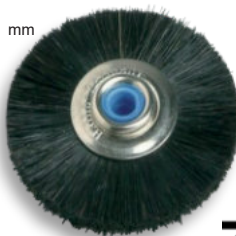

1 rij

€ XXX,xx

TIP

Wanddispenser + vulling



Volume: 1000 ml

Professionele wand-dispenser voor diverse vloeistoffen... waaronder: handzeep, hand-desinfectie GEL / Liquid, lotion of een andere vorm van ontsmettingsmiddelen.

Behuizing: aluminium, zilverkleurig, geëloxeerd.

Operationele hefboom:

roestvrij stalen hendel voldoet aan de hygiënische eisen, kan met de hand/ elleboog worden bediend.

Pomp van hoge kwaliteit: roestvrij staal met rechte zuigbuis, geschikt voor autoclaaf (134°C / 200min / 3 Bar), kan worden gesteriliseerd.

Art.nr: DD-720901



1 x ACTIE SET

€ XXX,xx

Art.nr: HIB0501

NU inclusief 1 ltr. professionele hand desinfectie GEL

Desinfectie Liquid & Whipes xxl PRO

HUISMERK

Gebruiksklaar

Vernietigt 99,99% van alle ziektekiemen binnen 1 minuut.

SNEL desinfectie voor o.a. alcohol-gevoelige oppervlakte.

Oppervlakte desinfectie

Gebruiksklare, aldehyde- en **alcoholvrije** hygiënische desinfectie liquid (vloeistof) voor professioneel gebruik in o.a. de medische-, tandheelkundige-, veterinaire, farmaceutische, cosmetische en voedsel industrie voor het reinigen en desinfecteren van alle waterbestendige oppervlakken en objecten. Breed

werkingsspectrum, hoge materiaal-compatibiliteit, snelle inwerktijd, zeer goede reinigende werking, aangename geur, tast de oppervlakte niet aan, huidvriendelijk, dermatologisch getest.

Geschikt voor alcohol-gevoelige oppervlakken.

Desinfecteren/schoonmaken van profylactische oppervlakte van niet-invasieve hulpmiddelen zoals kleine apparaten/instrumenten, meubilair, leer, kunstleer, geverniste oppervlakken, acrylglas, kunststof, glas, metaal.

Viruswerkzaamheid (zie Desinfectie Wipes XXL)

XXL wipes: dezelfde eigenschappen als het Liquid:

Gebruiksklare, aldehyde- en alcoholvrije hygiënische XXL wipes (doekjes) met een breed werkgebied in de medische industrie voor het desinfecteren van alle oppervlakken en objecten rondom patiënt, evenals oppervlakken in overige industrie waaronder de voedings-sector. **Aldehyde en alcoholvrij**

Geschikt voor alcohol-gevoelige oppervlakken!

Bewaarbox + vulling

€ XX,xx

Art.nr: DD-601108

Navulling

€ XX,xx

Art.nr: DD-601109

70
wipes



Afmeting(en) wipes: 29 x 30 cm



500 ml spuit-flacon

€ XXX,xx

Art.nr: DD-720880

1000 ml

€ XXX,xx

Art.nr: DD-720881

5000 ml

€ XXX,xx

Art.nr: DD-720885

Tijdelijk GRATIS* bewaarbox bij 1 navulling XXL wipes

*1 per adres



Reinigings poeder



Schoonmaken van o.a.: bitje (sport, apneu, snurk, knars, orthodontie), partiële prothese (gedeeltelijk kunstgebit), flexibele prothese (thermoplast), opzetstuk tandenborstel, beugel (uitneembaar), prothese (kunstgebit).



zakjes á 7 gram

Bestanddelen:

Magensium Carbonate, Mint Flavor, Potassium Bisuiphate, Potassium Peroxymonosulfate, Potassium Sulfate, Sodium Citrate, Trisodium Salt of citric Acid.

HUISMERK



1 doosje á 12 zakjes

€ XXX,xx

Art.nr: DH-0013

Reinigings setje



In de **mini ultrasonic** met zijn ca. 17.000 trillingen per minuut wordt elke prothese binnen de kortste tijd schoon, zelfs tandsteen, nicotine en andere verkleuringen hebben in de mini ultrasonic geen schijn van kans.



Het bijpassende reinigings poeder is chloorvrij, bleekt de prothese-kunststof niet en tast de weekmaker in de prothese niet aan zoals de meeste andere prothese- reinigings middelen wel doen.

Inhoud SET: 1 x reinigings-apparaat
2 x zakje reinigings-poeder incl. mini borsteltje

HUISMERK



1 x SET

€ XXX,xx

Art.nr: DH-0011

Dental Brite

Verwijdert plak, vieze geurtjes en gistachtige schimmels, doodt bacteriën voor 99,99%.



Reinigt en desinfecteert op de meest effectieve manier alle uitneembare mondstukken waaronder: **snurkbeugels, gebitsbeschermers, splints, gebitsprotheses, tandenknars-plaatjes, spalken tandenbleekbitjes, (orthodontische) beugels**, en dit alles zonder de kunststof te beschadigen of te verkleuren.



Sport bitje



Beugel



Gebits-
prothese



Tandenknars
bitje



Snurk-Apneu
beugel

MRA



1 potje á 170 gram

€ XXX,xx

Art.nr: 72-D8

Dupliceer silicoon 1:1 - Turbosil Blue



De originele 'Additionsvernetzendes' 1:1 dupliceer silicoon ...luchtbel vrije verwerking voor een exacte en een nauwkeurige detail weergave. Stabiël, scheur vast, flexibel, vormvast, 100% krimprij, 100% homogeen.

Geschikt voor alle dupliceer doeleinden: met manchet of in kuwet

Spaarzaam doseren door de handige liter fles verpakking met schroefdop.

Geschikt voor dupliceerdoeser-apparaat.

10 kg. (5 + 5 kg)

€ XXX,xx Art.nr: 720010Turbo

- Dichtheid: 1,1 g/cm³
- Mengtijd: ca. 25 sec.
- Verwerkingstijd: ca. 2½ min.
- Uitharding : binnen 10 min.
- Ontvormbaar na: ca. 12 min.
- 1:1 mengverhouding A en B

HUISMERK



2 kg. (1 + 1 kg)

€ XXX,xx

Art.nr: 72002Turbo

Hardheid:
SHORE 23

SilaPoli



Beste anti-bacterieel voorpolijstmiddel ...
dat zoals puimsteenpoeder verwerkt
wordt. **SilaPoli** is superieur ten opzichte
van de normale puimsteenpoeder.

Polijst sneller en zorgt voor nog meer glans!

Voordelen: Geen silicose risico zoals bij puimsteen + Anti-
bacteriële werking, geen vieze geur meer! + Hoge abrasieve
werking + Super gladde oppervlakte + Voordeliger en zuinig
in gebruik door meer volume (per gewicht) + **Anti allergisch**

HUISMERK




10 KG SLECHTS

€ XXX,xx

Art.nr: DK-72010

SilaPoli Liquid

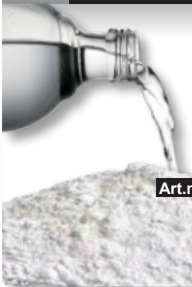

SilaPoli Liquid is een desinfecterende vloeistof,
dood bacteriën, zorg dat de puimsteen langer vochtig
blijft en beter aan de borstel hecht. De vloeistof is
handverzorgend en heeft een
subtiële appelgeur.

5 LITER

€ XX,xx

Art.nr: DK-72009-5



Voor elke puimsteenpoeder geschikt,
**optimaal resultaat met
onze SilaPoli puimsteen!**

HUISMERK



1 liter

€ XXX,xx

Art.nr: DK-72009-1

Afdruk materiaal 1:1

Dentasil Additie vinyl silicone:

Hoge scheursterkte, uitstekend elastisch
herstel, hoge dimensionale stabiliteit.
'Biocompatibel' werkt goed met organische
kunststoffen en gips.

Prijs per cartridge: € XX,xx

10 cartridges

SLECHTS

€ XXX,xx

Cartridge á 50ml



MONO



Mengtijd 2:00min Mondduur 2:30min
SHORE 72
72-1050-MO

HEAVY



Mengtijd 2:30min Mondduur 1:30min
SHORE 62
72-1050-H

MEDIUM



Mengtijd 2:00min Mondduur 2:30min
SHORE 53
72-1050-M

LIGHT



Mengtijd 1:30min Mondduur 1:30min
SHORE 53
72-1050-L

X-LIGHT



Mengtijd 1:30min Mondduur 1:30min
SHORE 53
72-1050-XL

BITE



Mengtijd 0:45min Mondduur 1:00min
SHORE 95
72-1050-B

TRANS- PARANT



Mengtijd 0:30min Mondduur 1:30min
SHORE 72
72-1050-T

Prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) & transportkosten, zet- en drukfouten onder voorbehoud. Aanbiedingen zijn NIET geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties of persoonlijke prijs-afspraken. Aanbiedingen zolang voorraad strekt en geldig t/m 30-06-2025. Product afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Algemene leveringsvoorwaarden: <https://www.dentalsil.com>.



<https://www.dentalsil.com/webwinkel>



[dentalsil.com](https://www.dentalsil.com)



info@dentalsil.nl



0495-651214



0495-652474