

DENTALSIL® PRESENTEERT

easy+graft™

Het β -TCP granulaat voor alle toepassingen

easy-graft™ botmateriaal begint daar, waar andere botmaterialen hun grenzen bereikt hebben.

Voordelen op een rij:

Deegachtig / Pasteus uit de spuit

Totale (stoel) behandelijd: 2½
minuut

100% synthetisch

100% resorbeerbaar

Stopt elke bloeding

Wordt in situ 'bot'-hard

Stabiliseert onmiddellijk

Kleine defecten: geen membraan
nodig

Voor alle patiënten

Voor alle indicaties

Voor alle gebruikers

Voor meer informatie of een
persoonlijke demonstratie kunt
u contact opnemen met:

Dentasil

E-mail: info@dentasil.nl

Website: www.dentasil.com

easy-graft™ bestaat uit twee componenten: β -TCP granulaat en Biolinker vloeistof. Het easy-graft™ granulaat is 100% synthetisch, compleet resorbeerbaar en bestaat uit de nieuwe ontwikkelde bio-keramische β -tricalciumfosfaat granulaat met een antibacteriële laag. Door toevoeging van Biolinker vloeistof wordt deze antibacteriële laag plastisch, het granulaat blijft zo aan elkaar hechten en vormt nu een samenhangende massa die zich perfect laat modelleren. In contact met vloeistof zoals bloed, speeksel of zoutoplossing wordt deze laag 'bot'hard en vormt zo een stabiel botvormlichaam. Bij kleine defecten is geen membraan nodig. easy-graft™ is osteoregeneratief en wordt in een tijdbestek van maximaal 3-12 maanden compleet door autolog bot vervangen.

Indicatie Kaakchirurg:


Vullen van holtes (zysten, aveolen,
wortelpuntresektieholtes, sinusbodemlevatie)
Opbouw van verloren gegaan bot (augmentatie).
Botmateriaal easy-graft™ is deegachtig/pasteus,
blijft liggen en laat zich perfect modelleren tot
het uithardt. Bij kleine defecten is geen
membraan nodig.




Root-top resection with
Easy-Graft

easy handling of
Easy-Graft: no single
pieces in the
surrounding

Pat.: male, 58 years old
Prof. Dr. Dr. Weber, 24.09.2007

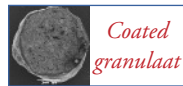

*Coated
granulaat*

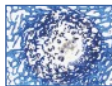

*100%
Vervanging door
autolog bot*



*Bloed
stollende
werking*

Tandarts: Vullen van extractieholtes

Paradontoloog: Vullen van pockets en bifurcaties

Implantoloog: Opvullen en stabilisatie rond implantaten in extractieholtes

VERPAKKING

- easy-graft™ 150 (500-630 μ m)
- easy-graft™ 400 (500-1000 μ m)

